



echobell  
by ThoCho

GOOD VIBRATIONS zentriert aus der mitte



# Praxishandbuch I

## Die 12 KRAFTtore

## Allgemeines



*echobell* basiert auf Jahrtausende altem Wissen über die rhythmischen Zusammenhänge und Abläufe im menschlichen Körper.

Die mögliche Veränderung von Wohlbefinden in mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene beim Einsatz von *echobell* wird vom Hersteller auf die pulsative und akustische INFORMATIONsübertragung von natürlichen Grundmustern und Eigenschwingungen chemischer Elemente zurückgeführt.

Spürbare Veränderungen von Schmerzverhalten und generelles Wohlfühlen sind stets und ausschließlich Inszenierungen des eigenen körperhaften biologischen Systems.

Die möglichen Reaktionen beim Arbeiten mit *echobell* können somit als – das biologische System „inspirierende“ musikalische Kompositionen – verstanden werden. Gleich dem veränderten Wohlfühlverhalten nach dem Hören einer Komposition klassischer Meisterwerke der Weltmusik.



Die im Folgenden beschriebenen Empfehlungen zur Anwendung von *echobell* am menschlichen Körper basieren auf jahrtausende alten klangmedizinischen Erfahrungswerten sowie den rund 30-jährigen Entwicklungsarbeiten von THO CHO und zahlreicher Probanden-Erfahrungen.



Laufende Studien und weitere Erfahrungswerte sind für alle *echobell* anwenderInnen auf der *echobell* webseite ([www.echobell.at](http://www.echobell.at)) einsehbar.

Im Weiteren weist die *echobell gmbh* darauf hin, dass die selbstständige Nutzung von *echobell* in der Eigenverantwortung des Nutzers liegt. Das vorliegende *echobell praxishandbuch I* „Die 12 KRAFTtore“ stellt ein Basiswerk dar. Weitere Praxishandbücher für Spezialthemen werden in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht.

## Das Arbeiten mit *echobell*

Der Einsatz von *echobell basic* bietet die Möglichkeit, mit speziell komponierten Schwingungsmustern – welche unveränderlich im „Gehirn der *echobell basic*“ eingearbeitet sind – das Energiesystem des Körpers zu versorgen.



Zur täglichen Anwendung geeignet, können auf diese Weise Körperflüssigkeiten (wie z.B. extrazelluläre Flüssigkeit, Blut und Lymphe) welche quasi die INFORMATIONsbrücken zwischen den Zellen darstellen – aktiviert und stimuliert werden. So können – mitunter gelartige – Verdickungen im Flüssigkeitsmilieu sanft aufgelöst und dadurch energetische Blockaden harmonisiert werden.

## Praktische Anwendung



*echobell basic* kann unter anderem bei folgenden Befindlichkeiten eingesetzt werden.<sup>1</sup>

1. Energetische Blockaden-Lösung
2. Energetische Organ-Aktivierung
3. Zellschock-Harmonisierung (Unfälle, Überlastungen)



4. Zell-Aktivierung über die Akupunktur-Punkte
5. Aussteuern von Denk-Blockaden
6. Allgemeines Wohlbefinden fördern

---

<sup>1</sup> siehe Haftungsausschluss hinteres Deckblatt



## AKTIVES TUN mit *echobell*

Bewusst mit *echobell* zu arbeiten bedeutet, sich mental, emotional und körperhaft auf ein spezielles Thema einzustimmen. Während des aktiven Tuns mit *echobell* empfiehlt es sich, den in den KRAFTtoren angeführten Leitsatz anzudenken und aus der bildhaft dargestellten Negativ-Haltung in die angebotene lebensbejahende Emotion zu wechseln.



## PASSIVES TUN mit *echobell*

*echobell* kann den Körper im Sitzen, im Liegen oder sogar im Schlaf fein stimulieren.

Besonders bei sitzenden Tätigkeiten empfiehlt sich der Einsatz von "*echobell click*" – dem Einschub-System – mit dessen Hilfe Ihre *echobell* z.B. am Stuhl befestigt werden kann. So kann *echobell* einen wesentlichen Beitrag zur grundlegenden Zellfrische und Zentriertheit des modernen Menschen leisten.

## Grundlagen zur Anwendung



*echobell* kann in drei Intensitäts-Stufen angewendet werden. Die Erfahrungswerte zeigen, dass bei Intervention auf der Stufe 1 "soft" entspannende (Dilatation) bzw. auf Stufe 3 "intensiv" spannungsfördernde Reaktionen (Kontraktion) zu erwarten sind.



### Stufe 1: soft

Empfohlen im Kopfbereich und an anderen hochsensiblen Körperzonen. Weiters bei hypersensiblen Menschen, Kindern, Babys und/oder auf Wundstellen (über Gips oder Verband) zur rascheren Regeneration.

### Stufe 2: medium

Empfohlen für die permanente Anwendung auf bestimmten Körperzonen sowie generell auf als sensibel empfundenen Körperzonen.

### Stufe 3: intensiv

für gezielte kurzzeitige Anwendung sowie für die Anwendung mittels "*echobell click*".

## So funktioniert *echobell*

1. Nach Einschalten Ihrer *echobell* wird der Computerchip für einige Sekunden aktiviert.
2. Anschließend ertönt der *echobell* GONG mit der Hauptschwingung im Tempo der Kohlenstoff-Eigenresonanz.



3. Die folgende „Frequenzdusche“ ermöglicht Ihrem biologischen System das Erkennen und die Lockerung von energetischen Stauungen.
4. Anschließend erfolgt die INFORMATIONENübertragung der klanglich kombinierten Eigenresonanzen von Wasserstoff und Kohlenstoff. Die daraus natürlich entstehende Schwebungs-Frequenz wird als Vibration über den „*echobell stamp*“ an den Körper übertragen.
5. Die darauf folgende Stillephase ermöglicht ihrem biologischen System das „Nach- und Einarbeiten“ der übermittelten Schwingungsmuster.



6. In unregelmäßigen Zeitabschnitten ertönen sehr feine hohe Klangstrukturen (Fluidal-Aktivierung) welche eine Resonanz zu den neuronalen Netzwerken im Gehirn herstellen und so einen Reiz zur kommunikativen Stimulanz setzen können.
7. Da unser Körper in fast allen molekularen Verbindungen Kohlen- und Wasserstoffatome zur Aufrechterhaltung eines ganzheitlich gesunden Zustandes nützt, kann durch die *echobell basic komposition* ein Rückführen in ein natürlich schwingungsfähiges System unterstützt werden.



### ***echobell basic: die Komposition***


Die Komposition von *echobell basic* kann energetische Schwachstellen im Körper in Resonanz bringen. So kann sie schwer analysierbare energetische Blockaden, welche oft durch lange zurückliegende Ereignisse ausgelöst wurden, entdecken und durch das eigene autoregulative System harmonisieren.




## Gesamtübersicht des Kompositionsablaufes

Die Komposition ist im LOOPverfahren eingespielt - also auf ständige Wiederholung des dargestellten Ablaufes programmiert. Mit einer Abspieldauer von drei Minuten ist sie in ihrem komplexen Aufbau (wie im Detail auf den Vorseiten ausgeführt) in folgende Abschnitte unterteilt.

### *echobell basic* Funktion, Länge drei Minuten

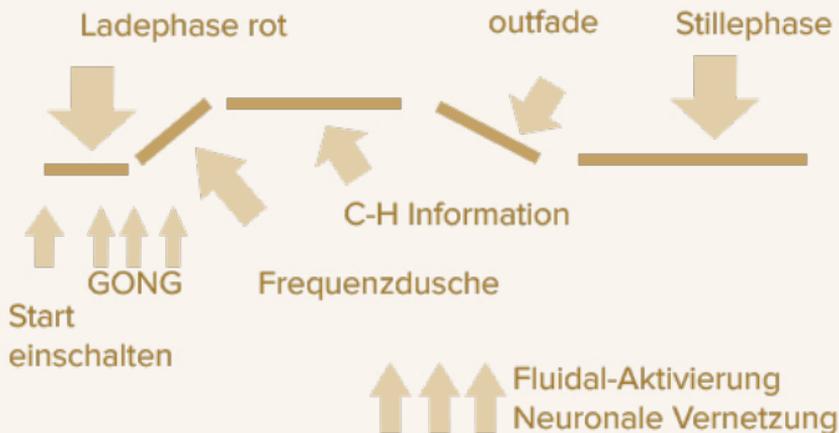

## KRAFTlinien

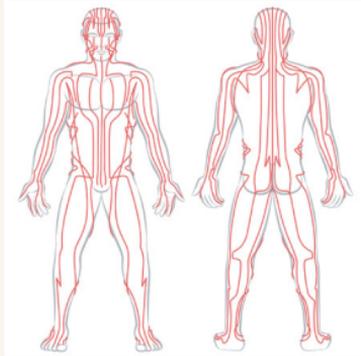

In den folgenden praktischen Anwendungsbeispielen sind die seit Jahrtausenden bekannten elektrisch gesteuerten Kommunikations-Leitungen des menschlichen Körpers bildhaft dargestellt.

Mit *echobell basic* können Sie sämtliche sensible Körperbereiche sanft stimulieren. Diese sind aus den verschiedenen medizinischen Traditionen wie z.B. TCM oder Ayurveda bekannt.

Zudem kann *echobell* in jedem Körperbereich angewandt werden, welcher einer Stimulanz bedarf.



## Sensible Zeitfenster in der Anwendung

Relevante Anwendungszeiten von *echobell* ergeben sich aus den Erkenntnissen der biologischen Organuhr und der persönlichen Geburtszeit.

### Die biologische Organuhr

Seit Tausenden von Jahren werden die natürlichen rhythmischen Abläufe und Aktivitätszeiten der Organe genutzt, um einen optimalen Einfluss auf die Gesunderhaltung auszuüben. In der Tabelle auf der folgenden Seite finden sie die Aktivitätszeiten der Organe.





## Sensible Zeitphasen

Während dieser Zeitphasen sind Interventionen mit *echobell* bei folgenden Organen besonders wirksam:

Organ	Sensible Zeit	Emotionen
Lunge	03-05 Uhr / 15-17 Uhr	traurig / heiter
Dickdarm	05-07 Uhr / 17-19 Uhr	festhalten / loslassen
Magen	07-09 Uhr / 19-21 Uhr	unverstanden / akzeptieren
Milz	09-11 Uhr / 21-23 Uhr	misstrauen / vertrauen
Herz	11-13 Uhr / 23-01 Uhr	depressiv / lebensfroh
Dünndarm	13-15 Uhr / 01-03 Uhr	unentschieden / klar
Blase	15-17 Uhr / 03-05 Uhr	kein Selbstwert / selbstsicher
Niere	17-19 Uhr / 05-07 Uhr	ängstlich / mutig
Kreislauf	19-21 Uhr / 07-09 Uhr	gestresst / genießen
Dreifach Erwärmer	21-23 Uhr / 09-11 Uhr	einsam / geborgen
Gallenblase	23-01 Uhr / 11-13 Uhr	schuldig / frei von Schuld
Leber	01-03 Uhr / 13-15 Uhr	zornig / visionär





## Die persönliche Geburtszeit

Die Geburtszeit eines Menschen weist hochsensible Zusammenhänge zu den in den Momenten der Geburt aktiven Organstrukturen auf. Das zeigen die jahrzehntelangen Forschungsarbeiten von THO CHO unter anderem auf.


Interventionen mit *echobell* während der persönlichen Geburtsstunde wirken daher intensiver und tiefgreifender. Zudem ergibt sich ein besonders sensibler Zusammenhang zu dem während der Geburtszeit aktiven Organ und dessen emotionalen Zuordnungen. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden sie als *echobell nutzerIn* unter [www.echobell.at](http://www.echobell.at)

Die Nutzung von *echobell* zur Aussteuerung von emotionalem Ungleichgewicht ist generell ein besonders wirksames Instrumentarium zur Unterstützung eines ganzheitlichen Gesunderhaltens.

Bei weiterführenden Fragen wenden sie sich gerne an das *echobell team* unter [info@echobell.at](mailto:info@echobell.at)

# KRAFTtor 1

## Zentriertheit

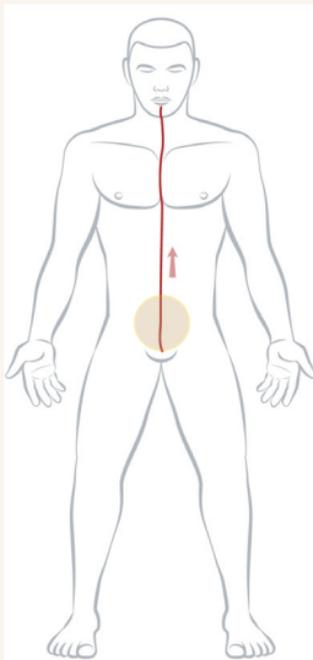

**Optimales  
Zeitfenster:**  
individuelle Geburts-  
zeit - Organuhr

**Empfehlung:**  
Anwendung  
mehrmals täglich  
*STUFE 3*

direkt auf dem Nabel



## Das Krafttor 1 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Zentriertheit aus der Mitte

Die Aktivierung dieses Punktes kann grundlegend emotionale Spannungen und Überlastungen aussteuern. Nach der uralten vedischen (indischen) Weisheitslehre steht der Nabelpunkt für die „emotionale Ruhe“ im Menschen.

*„Ich stehe  
neben meinen  
Schuhen!“*



*„Ich bin in  
meinem Zentrum!“*

**Leitsatz:** *„Ich agiere zentriert aus meiner Mitte!“*

### Mental

Eigene Meinung formulieren und argumentieren.

### Emotional


ICHfindung – seine Mitte spüren, Zentrumskraft fühlen.

### Körperlich (nach TCM)

Schwindel-Empfinden, Körpersymmetrie aussteuern,  
Bauchspannung regulieren, Bauchfett abbauen.

## KRAFTtor 2

### Selbstwert

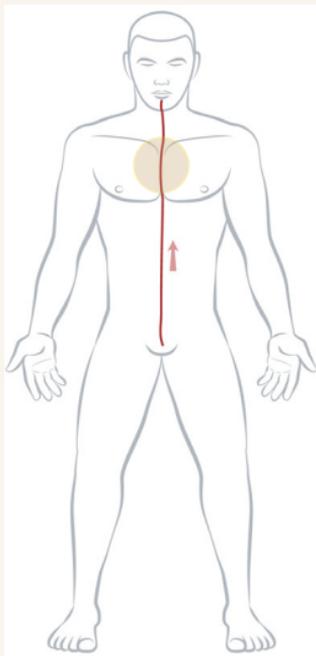

**Optimales  
Zeitfenster:**  
individuelle Geburts-  
zeit - Organuhr

**Empfehlung:**  
Anwendung  
mehrmals täglich  
*STUFE 2*

eine Handbreit unter dem Schlüsselbein



## Das Krafttor 2 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Selbstbewusstsein

Die Aktivierung dieses Punktes belebt die Thymusdrüse, die für Selbstwert und Überzeugung in das reine Tun steht.

*„Ich hab keine eigene Meinung!“*



*„Ich bin überzeugt von mir!“*

**Leitsatz:** *„Ich bin überzeugt von meiner Haltung!“*

### Mental

Mangelnder Selbstwert in der Kommunikation. Von sich selbst und seinem Denken nicht überzeugt.

### Emotional


Schüchternheit im Vertreten seiner Empfindungen und Bedürfnisse. Hadern mit der Selbsteinschätzung.

### Körperlich (nach TCM)

Brustbrennen, Beklemmung im Herzen, Atemnot, Flachatmung.

## KRAFTtor 3

### Lebenskraft

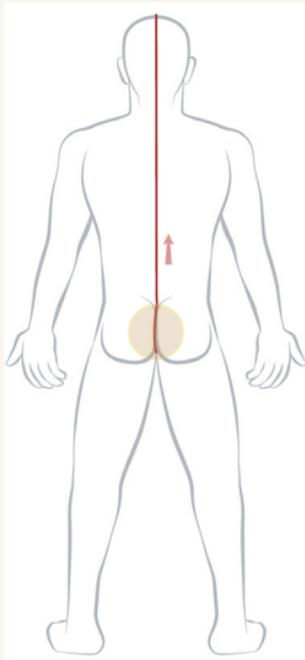

auf dem Steißbein

**Optimales  
Zeitfenster:**

individuelle Geburtszeit - Organuhr

**Empfehlung:**

Anwendung  
mehrmals täglich  
*STUFE 2*



## Das Krafttor 3 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Potential des Überlebens

Dieser Punkt aktiviert die Bewegungszentren unterhalb der Hüften (durchblutungsfördernd).

*„Ich schaff das heute nicht?!“*



*„Ich spüre die KRAFT der QUELLE!“*

**Leitsatz:** *„Kraftvoll und mutig gehe ich den Weg!“*

### Mental

Mentale Unterwerfung unter Systeme, die einem in Wahrheit widersprechen, denkerische Ohnmacht, eingeschränkte Lösungs-Kompetenz.

### Emotional


Kraftlosigkeit und Angst vor Handlungsnotwendigkeit.

### Körperlich (nach TCM)

Durchblutung der Beine, Ischias, Hüftschmerzen, Nerven-Irritation der Beinstruktur.

## KRAFTtor 4

### Stressreduktion

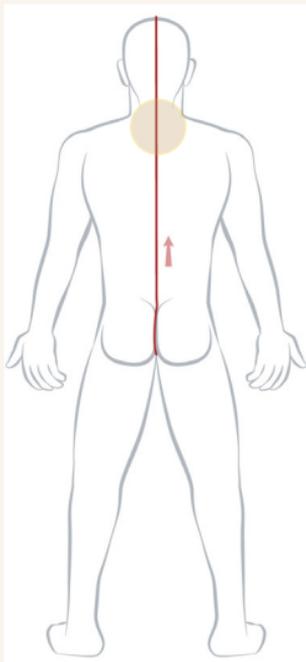

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Jederzeit bei  
Bedarf

**Empfehlung:**  
Anwendung  
1 x halbstündig  
*STUFE 2*

Körpermitte Schulterhöhe



## Das Krafttor 4 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Stressreduktion

Die Aktivierung dieses Punktes steuert die zentrale Stress-Reduktion des biologischen Systems.

*„Es reicht wieder mal!“*



*„Locker bin ich und befreit!“*

**Leitsatz:** *„Ich bin befreit von jeder Last!“*

### Mental

Belastende Gedanken, Arbeitsüberlastung.

### Emotional


Anhaltender Leistungsdruck, Sorgen anderer auf seinem Rücken tragen.

### Körperlich (nach TCM)

Stress durch akute oder chronische Schmerz-Zustände.  
Schulterblockade, Rundrücken, Wirbelsäulen-Beschwerden.

## KRAFTtor 5

### Der klare Blick

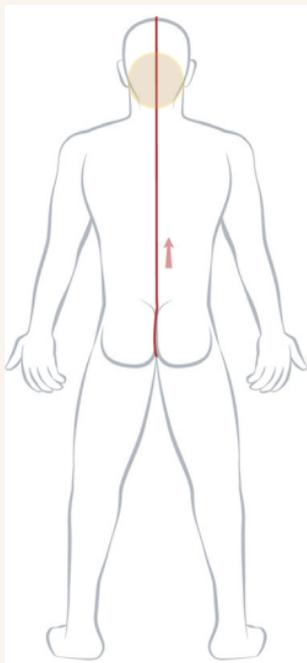

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Leber

**Empfehlung:**  
Anwendung  
1 x halbstündig  
*STUFE 2*

Körpermitte in Höhe Ohrläppchen



## Das Krafttor 5 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Sehkraft stärken

Die Aktivierung des 2. Halswirbels kann die Sehnerven stimulieren und den klaren Blick fördern.

*„Überall Nebel  
hier!“*



*"Alles wieder  
KLAR!"*

**Leitsatz:** *"Klar sehe ich den Weg!"*

### Mental

Langes Arbeiten am Computer.  
Ermüdung bei mental/optischer Aktivität.

### Emotional


Ein Thema nicht „sehen“ wollen.  
Lösungsflucht wegen Unbehagen vor Konfrontation.

### Körperlich (nach TCM)

Schwächung der Augen-Muskulatur, Sehnerv-Schwäche,  
Schleier vor den Augen.

## KRAFTtor 6

### Ausdauer

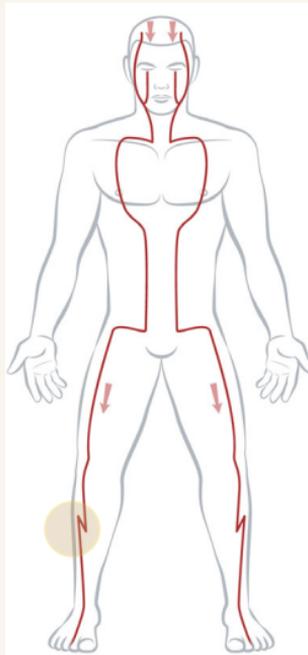

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Magen

**Empfehlung:**  
1-3 Wiederholungen  
halbstündig  
*STUFE 2*

Eine Handbreit unter dem **RECHTEN** Knie  
außen neben dem **RECHTEN** Schienbein



## Das Krafttor 6 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Ausdauer

Die Aktivierung dieses Punktes erhöht die Ausdauer in mentaler und körperlicher Weise.

**Leitsatz:** *"Ich bin verständnisvoll auf meinem Weg!"*

*„Ich fühle mich  
UNVERSTANDEN!“*



*"Okay, ich  
VERSTEHÉ!"*

### Mental

Bei Konzentrations-Schwäche, Lösungsfindung, geistiges Verarbeiten (Akzeptieren) von neuen Informationen.

### Emotional


Unverständnis gegenüber seinem Umfeld, die chronisch kritische Haltung.

### Körperlich (nach TCM)

Völlegefühl, Sodbrennen, Magenverstimmung, Ausdauer-sportarten (Langlaufen etc.).

## KRAFTtor 7

### Regeneration

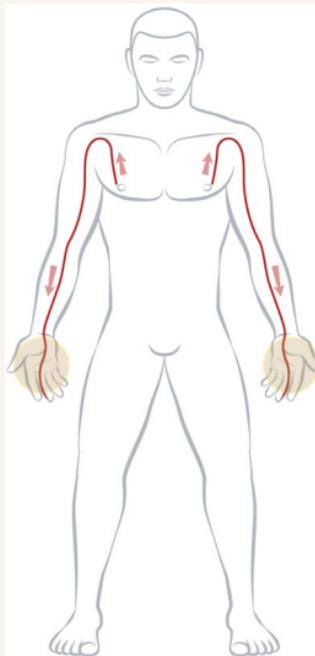

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Kreislauf

**Empfehlung:**  
1-3 Wiederholungen  
halbstündig  
*STUFE 3*

An den Handinnenflächen rechts oder links



## Das Krafttor 7 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Regeneration & Spannungslösung

Die Aktivierung dieses Punktes steuert die Genussfähigkeit des Systems aus.

„Ich bin  
ERSCHÖPFT!“



"Jetzt  
GENIESSE ich!"

**Leitsatz:** "Der Abend gehört mir und meinem Lebensgenuss!"

### Mental

Ausgebrannt-Sein, geistige Ermüdung.

### Emotional


Workoholiker – der klassische „Nachtarbeiter“. Genuss-Unfähigkeit bzw. unnatürlich exzessiver Stressabbau.

### Körperlich (nach TCM)

Schreibkrampf, mechanische Überlastungen im Handbereich, Herzrhythmusirritation, Blutdruckregulation.

## KRAFTtor 8

### Vertrauen

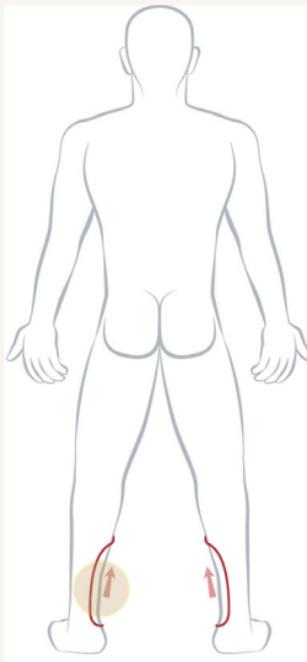

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Milz

**Empfehlung:**  
mehrmals  
täglich  
*STUFE 3*

Eine Handbreite über dem **LINKEN** Innenknöchel



## Das Krafttor 8 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Vertrauen schaffen

Die Aktivierung dieses Punktes kann die elektrischen Bahnen des Beckenbereiches stimulieren sowie Einfluss auf die Drüsen-Regulation bewirken.

*„Ich misstraue Allem  
und Jedem!“*



*"Ich vertraue  
dem Leben!"*

**Leitsatz:** *„Ich vertraue und öffne mich dem Leben!“*

### Mental

Übergenaues Ausarbeiten von Formulierungen,  
überkritische Analyse von Schriftverkehr

### Emotional


Misstrauen gegenüber dem Leben, Furcht vor dem  
falschen Weg, innere Distanz zu Menschen.

### Körperlich (nach TCM)

Aussteuerung der Sexualfunktionen, Hormonregulation,  
Zuckerhaushalt im Blut, Beckenverspannung.

## KRAFTtor 9

### Klarheit

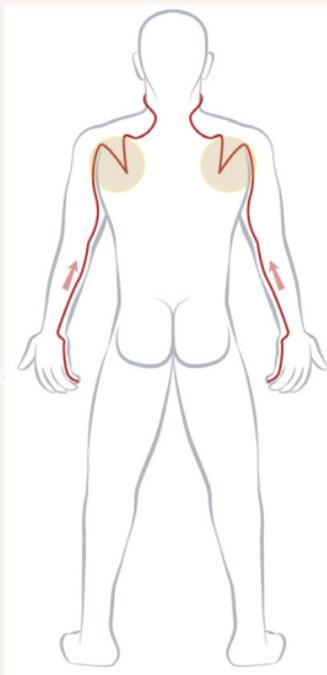

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Dünndarm

**Empfehlung:**  
Anwendung  
mehrmals täglich  
*STUFE 2*

Mittig im oberen Schulterblattbereich, rechts oder links



## Das Krafttor 9 steht für folgende Lebensthemen

**Grundsätzliches: Unterscheidungskraft, Klarheit schaffen**

Die Aktivierung dieses Punktes belebt die Verarbeitung von ausstehenden Prozessen.

*„Ich treffe nie wieder Entscheidungen!“*



*„Ich gehe den Weg!“*

**Leitsatz:** *„Ich entscheide und kanalisiere Kraft auf dem Weg!“*

### **Mental**

Denkblockaden in der Entscheidungsfindung

### **Emotional**


Empfinden von ruheloser Erregung, Agieren im Vakuum des „Nicht-Entscheiden-Müssens“. Suche nach Entlastung.

### **Körperlich (nach TCM)**

Schulterbeschwerden, Verdauung, Gelenkbeweglichkeit, Dünndarm.

## KRAFTtor 10

### Kommunikation

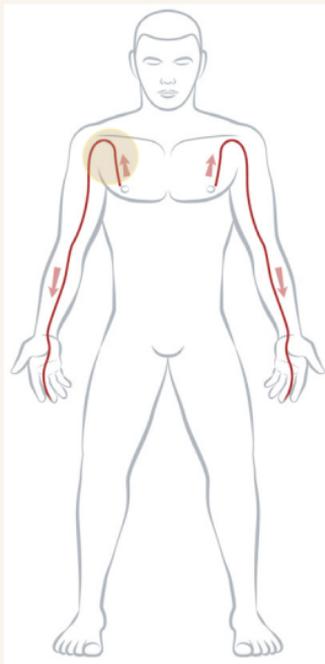

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Lunge

**Empfehlung:**  
mehrmals  
täglich  
*STUFE 3*

Unter dem Schlüsselbein in Achselhöhe **RECHTS**



## Das Krafttor 10 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Agieren in und mit der Welt.

Die Aktivierung dieses Punktes unterstützt die Kommunikations-Bereitschaft.

*„Ich spreche kein  
Wort mehr!“*



*" Ich bin heiter  
und fröhlich!"*

**Leitsatz:** „Ich atme mit der Welt und bin EINS mit ihr!“

### Mental

Mentaler Rückzug, Kommunikations-Blockade

### Emotional


Traurigkeit, oft aus vergangenen Erinnerungen,  
in sich gekehrt und isoliert.

### Körperlich (nach TCM)

Stottern, Sprachfehler, Sauerstoffarmut im Blut,  
Lungenbelastung, Halsschmerzen.

## KRAFTtor 11

### Loslassen

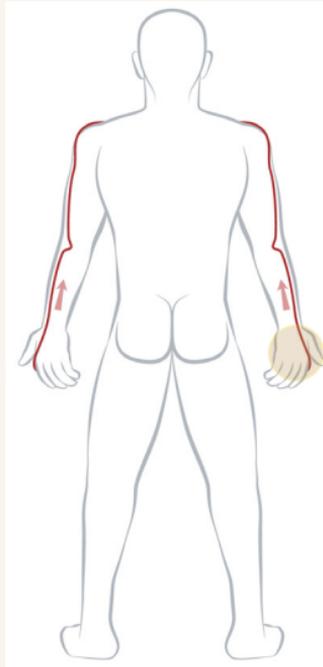

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Dickdarm

**Empfehlung:**  
mehrmals  
täglich  
*STUFE 3*

**RECHTE** Außenhand zwischen Daumen und Zeigefinger



## Das Krafftor 11 steht für folgende Lebensthemen

**Grundsätzliches: Entspricht alte Muster und Schlackenstoffe**  
Die Aktivierung dieses Punktes belebt die elektrischen Leitbahnen des Dickdarms.

*„Ich halte fest!“*



*"Ich lasse los"*

**Leitsatz:** *„Ich lasse los und erfrische mich!“*

### **Mental**

Festhalten an alten Denk-Strukturen,  
beharrliches Rezitieren von bereits Gesagtem.

### **Emotional**


Loslassen alter Verhaltensmuster, Traumarbeit entschlüsseln.

### **Körperlich (nach TCM)**

Darmträgheit, Migräne, Bewegungshemmung.

## KRAFTtor 12

### Vision

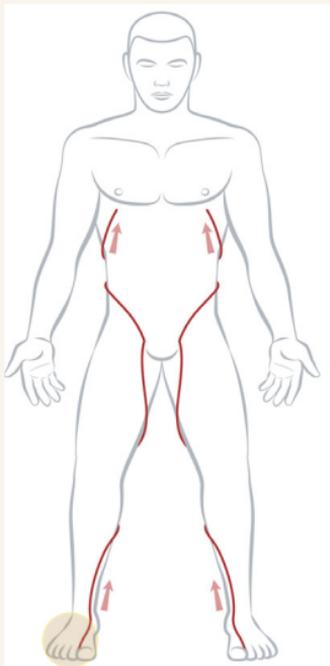

**Optimales  
Zeitfenster:**  
Organuhr  
Leber

**Empfehlung:**  
mehrmals  
täglich  
*STUFE 2*

Auf dem **RECHTEN** Fuß vorne zentral



## Das Krafttor 12 steht für folgende Lebensthemen

### Grundsätzliches: Vision, Vorausschau

Die Aktivierung dieses Punktes belebt die Fähigkeit, seine Visionen bewusst wahrzunehmen.

*„Ich bin zornig!“*



*„Alles Gute  
kommt von  
oben!“*

**Leitsatz:** *„Ich bin visionär im Denken, Fühlen und Handeln!“*

### Mental

Aggressives Denken, intolerantes Kommunizieren.

### Emotional

Gestaute Wut- und Hass-Energien dominieren die Lebenshaltung

### Körperlich (nach TCM)

Stoffwechsel, Leberharmonisierung, Hautrötung.

## Erweitertes Angebot: *echobell workshops*



Wir bieten Ihnen Workshops und Weiterbildungen zur Funktion der *echobell werkzeuge* und den Grundlagen bzw. dem Erarbeiten von Fachwissen im Umgang mit KLANG und seinen Wirkungen an.

Nach der Teilnahme an den *echobell workshops* wissen die Teilnehmer wie *echobell* tickt, kennen alle Anwendungsbereiche von *echobell* und können *echobell nutzerInnen* schulen.

Die aktuellen Termine finden Sie unter [www.echobell.at](http://www.echobell.at)

## Zubehör



„echobell click“ ist eine Erweiterung der *echobell basic*. Durch das Montieren des "echobell click systems" sowie dem folgenden Einrasten der *echobell basic* in dieses Zubehör werden Sie ihre Möbel wie folgt auf

- Sessel zum Klang- und Vibrations-Sessel
- Hocker zum Klang- und Vibrations-Hocker
- Liege zur Klang- und Vibrations-Liege
- Bett zum Klang- und Vibrations-Bett

Nähere Informationen finden Sie unter: [www.echobell.at](http://www.echobell.at)

## Teilen Sie Ihre Begeisterung!



Wir sind abhängig von ihrer Zufriedenheit. Teilen sie ihre Erfahrungen mit *echobell* und lassen Sie uns dafür DANKE sagen. Unser Angebot verbreitet sich primär durch Kundenerfahrungen und wenn sie möchten, vergüten wir Ihre Weiterempfehlung gerne.

Weitere Info unter [www.echobell.at](http://www.echobell.at)

Sind Sie an einer persönlichen Weiterbildung interessiert? Besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen (Vorträge, Workshops, Ausbildungen) und/oder lesen sie sich in unser online Bildungsangebot ein.

[www.echobell.at/events](http://www.echobell.at/events)

## echobell & Natur



Das Gehäuse Ihrer *echobell* besteht aus einem Kunststoff, der medizinisch hygienischen Anforderungen entspricht und lebensmittelecht ist.



Durch *echobell* fließt Gleichstrom, so ist ein biologisch verträglicher Energietransport der GOOD VIBRATIONS gewährleistet.

---

**Text:** echobell gmbh, [www.echobell.at](http://www.echobell.at)  
**Design:** mash marketing sharing; rpg-consulting e.U. - Robert Pischinger  
**Fotos:** kubator GmbH, [www.kubator.at](http://www.kubator.at): (S4, 41, 42, 43)  
Shutterstock.com/Peter Hermes Furian (S. 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,  
32, 34, 36, 38), Shutterstock.com/Vasilyev Alexandr, fotolia (S. 43),  
Shutterstock.com/Tatyana Vyc (S.14), Shutterstock.com/Pachai Leknettip  
(S.12), Shutterstock.com/Alena Ozerova (S. 44),  
echobell gmbh (alle weiteren Fotos)



by ThoCho



**echobell gmbh, Zweiländerstraße 3, 3950 Gmünd, [www.echobell.at](http://www.echobell.at)**

© **echobell gmbh, PHeb2018/1**

<sup>1</sup>Die *echobell* ist kein Medizinprodukt im Sinne des Gesetzes, daher eignet sich *echobell* bestimmungsgemäß nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke, für die Behandlung oder Linderung von Krankheiten, für Linderung oder Kompensierung von Verletzungen am menschlichen Körper. Die Anwendung von *echobell* erfolgt im jeweiligen Bereich der Eigenverantwortung und ist nach Absprache mit dem Arzt ihres Vertrauens zur Anwendung zu bringen.